


CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ La autoclave BKM-Z45B es un esterilizador horizontal, de alta presión totalmente automatizado.
- ✓ Toma el vapor como medio de esterilización por ser: rápido, seguro y económico.
- ✓ Adopta un generador de calentamiento de vapor instantáneo incorporado.
- ✓ Interfaz de operación con pantalla LCD que muestra parámetros como: temperatura, presión, hora, estado de funcionamiento, información de errores y alarma.
- ✓ Viene con tanque de agua de tipo abierto incorporado, de fácil limpieza, con filtro y sensor de nivel de calidad del agua interno.
- ✓ De uso común en diversos departamentos de Centros de Salud para realizar la esterilización de instrumentos este equipo viene con programas pre configurados: desenvuelto, envuelto, caucho, usuario 01, N-rápido, telas, utensilios, medio de cultivo, líquido sin sellar, etc.
- ✓ Incorpora seguridad automatizada: dispositivos de protección para sobre temperatura, control múltiple de protección para generador de vapor, mecanismo de enclavamiento de puerta automática que ofrece mayor seguridad, protección de sobrepresión de doble cámara y dispositivo de seguridad de circuito electrónico de esterilización.
- ✓ La cámara se calienta mediante un proceso calentador de película, lo que ahorra energía y tiempo. Registro con impresora incorporada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ **Capacidad:** 45L.
- ✓ **Clase de esterilización:** Clase B.
- ✓ **Tamaño de la cámara:** Ø316x618 mm.
- ✓ **Presión de diseño:** -0,1 / 0,3 MPa.
- ✓ **Temperatura:** 144 °C.
- ✓ **Rango de temperatura:** 105~138°C.
- ✓ **Material de la cámara:** Acero Inoxidable AISI304.
- ✓ **Consumo de energía:** 5.8 KW.
- ✓ **Fuente de alimentación:** AC220V ± 10%, 50/60Hz.
- ✓ **Tipo de registro:** Impresora incorporada estándar.

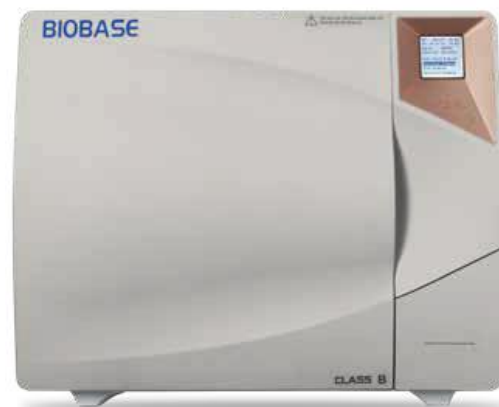

✓ Incluye:

- 01 bandeja de carga estándar Tipo B (311*522*100mm).
- 02 mangueras.
- Rollo de impresión.
- Manual.

✓ Tamaño externo (An*Pr*Al): 640*830*550 mm.

✓ Tamaño de embalaje (An*Pr*Al): 750*1015*730 mm.

✓ Peso: 140 Kg.

✓ Marca: BIOBASE.

✓ Procedencia: CHINA.

✓ Certificación: CE, ISO13485, ISO9001.

✓ Opcionales:

- Almacenamiento de memoria USB.
- Almacenamiento de memoria SD.

