



Manejo flexible y sencillo

Las siguientes funciones pueden ser operadas electrónicamente usando el panel de control en el cabezal de la lámpara:

- Encendido y apagado
- Modo ambiental
- Control de brillo de 10 pasos



HyLED 600M

Lámpara quirúrgica LED móvil

HyLED 600M ofrece una solución de luz quirúrgica para el quirófano de emergencia y cirugías menores:

Máxima flexibilidad

Gracias a su base móvil ultra-ágil, el sistema de bloqueo de cuatro ruedas y el diseño ergonómico del mango, la HyLED 600M va donde se la necesita con un excelente rendimiento.


Batería confiable

El módulo de alimentación puede durar hasta 10 horas (estado normal).



Especificaciones técnicas

	HyLED 600/600 M
Iluminancia central (a 1 m de distancia)	130 000 lx
Diámetro del campo de luz (a 1 m de distancia)	220 mm
Profundidad de iluminación (20 %)	1200 mm
Profundidad de iluminación (60 %)	600 mm
Temperatura color	4350 K
Índice de reproducción cromática (Ra)	96
Índice de reproducción cromática (R9)	96
Vida útil de la bombilla	≥60 000 h
Rango de atenuación	5-100 %
Dimensión de cabezal de lámpara	540 mm
Cantidad de bombillas LED	18
Consumo máximo de todas las fuentes de luz	65 W

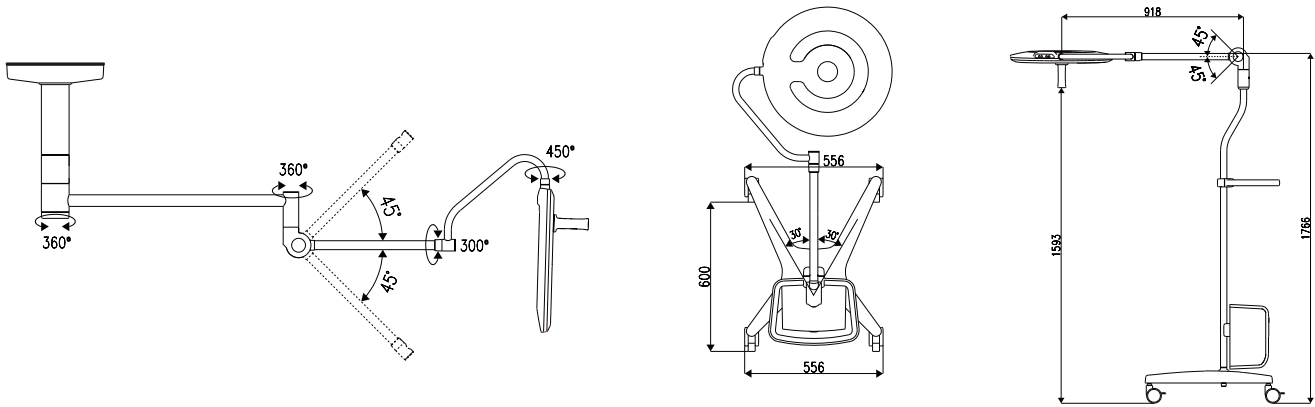

www.mindray.com

P/N: ES-LA-HyLED 600M-210285X6P-20200210
© 2020 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

mindray
healthcare within reach

Serie HyLED 600

Lámparas quirúrgicas LED



HyLED 600

Lámparas quirúrgicas LED

La cirugía ambulatoria, que no requiere una estancia hospitalaria nocturna, se ha hecho cada vez más popular debido a la creciente madurez de las técnicas quirúrgicas no invasivas. Diseñada para cirugía menor o de un solo día, la HyLED 600 proporciona una iluminación de alta calidad, con una mejor diferenciación de los tejidos y un color natural.

Iluminación de 130 000 luxes diseñada para cirugía menor o ambulatoria
Mejor diferenciación de tejidos con un índice de reproducción cromática (Ra y R9) de 96
Modo ambiental mediante una tecla de control individual
Cinco años de garantía para la bombilla LED

Cirugía plástica

Diámetro del campo luminoso de 22 cm para cirugías superficiales
Lámpara de doble cabezal para cirugía simultánea de cejas y mentón



Cirugía general

Intensidad de 130 000 lux con 1200 mm de profundidad
Mejor diferenciación de tejidos con un índice de reproducción cromática (Ra y R9) de 96



Cirugía endoscópica

Modo ambiental mediante una tecla de control separada
Diseño compacto y delgado para responder a cuestiones de flujo laminar



Obstetricia y ginecología

Fácil posicionamiento del cabezal de la lámpara para el médico mientras está sentado o de pie
Mejor dilución de sombra del 50 % con tubo y dos máscaras, adecuado para cirugía ginecológica o urológica.

